

VIBRALUXE PRO®

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de Vibraluxe Pro®. Vibraluxe Pro® a été conçu en s'inspirant des appareils professionnels permettant de réduire l'aspect de la cellulite, la flaccidité et la rétention de liquides. Vibraluxe Pro® réalise un massage sous-cutané intense et profond grâce à ses rotations et vibrations. Il contribue ainsi à améliorer la circulation et l'aspect de la peau, à tonifier les muscles, à modeler la silhouette, à réduire l'apparence de la cellulite et à favoriser l'élimination des liquides. Grâce à sa forme ergonomique, c'est un allié idéal à utiliser fréquemment.

ATTENTION ! AVANT D'UTILISER CET APPAREIL, LISEZ ATTENTIVEMENT LE MANUEL D'INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENTS

- N'utilisez pas Vibraluxe Pro® si vous êtes enceinte, avez des problèmes cardiaques ou des blessures physiques.
- **IMPORTANT.** N'utilisez pas Vibraluxe Pro® si vous êtes porteur de dispositifs tels que pacemaker, stérilet, vis, etc.
- Conservez Vibraluxe Pro® hors de portée des enfants.
- N'utilisez pas Vibraluxe Pro® si vous êtes atteint(e) de thrombose ou êtes sous traitement médical.
- N'utilisez pas Vibraluxe Pro® 1 heure avant ou après les repas.
- Si vous avez été atteint(e) d'une maladie grave, consultez votre médecin avant d'utiliser Vibraluxe Pro®.
- N'utilisez pas Vibraluxe Pro® à proximité de l'eau ou si vous avez les mains humides.
- Si vous ressentez une gêne quelconque lorsque vous utilisez l'appareil, arrêtez-le immédiatement
- Débranchez Vibraluxe Pro® du courant électrique après chaque utilisation.
- Ne démontez pas, ne réparez pas et ne modifiez pas Vibraluxe Pro®.
- Vibraluxe Pro® n'est ni un appareil médical, ni un appareil thérapeutique.
- En cas de doute, consultez votre médecin avant d'utiliser l'appareil.
- N'utilisez pas Vibraluxe Pro® sur des parties du corps où la peau présente des inflammations ou des éruptions cutanées.
- N'utilisez pas l'appareil plus de 5 minutes sur la même partie du corps.
- N'utilisez pas Vibraluxe Pro® avant de vous coucher, car le massage peut avoir un effet stimulant.
- N'utilisez pas l'appareil en étant allongé(e) sur votre lit.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (enfants inclus) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont limitées, qui sont inexpérimentées et ne possèdent aucune connaissance de l'appareil, sauf si elles sont supervisées par une personne responsable de leur sécurité ou si cette dernière leur fournit les instructions nécessaires pour utiliser correctement l'appareil.

- Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un distributeur agréé ou par une personne qualifiée afin d'éviter tout risque.

- N'utilisez pas le produit sans l'une des têtes.

- Si la tête que vous souhaitez utiliser est endommagée, ne vous servez pas de l'appareil. L'utilisation de Vibraluxe Pro® apporte de nombreux effets bénéfiques à votre corps grâce au profond massage sous-cutané qui associe vibrations et rotations.

- Il modèle la silhouette en tonifiant les muscles et en luttant contre la flaccidité, car il active les muscles grâce à son mouvement de rotation et de vibration.

- Il contribue à réduire l'aspect de la cellulite grâce à un massage profond et intense. L'aspect de la peau s'améliore et la peau d'orange diminue.

- Il permet de réduire la rétention de liquides. En améliorant la circulation, il favorise l'élimination de liquides et toxines.

- Permet de détendre les tensions musculaires. L'utilisation de Vibraluxe Pro® à faible intensité procure une sensation de bien-être sur les parties du corps où la tension musculaire s'est accumulé.


Le kit comprend :

- L'appareil de massage Vibraluxe Pro®
- Une tête lisse, pour un massage relaxant
- Une tête à grandes ondes, pour un massage tonifiant et modelant des parties du corps plus importantes
- Une tête à petites ondes, pour un massage tonifiant et modelant des parties plus petites
- Une tête à billes, pour un massage réducteur et raffermissant
- Une tête à lime, pour limer les durillons des pieds
- Un filet de protection à placer sur les têtes, pour un massage plus agréable
- Une trousse de voyage
- Un plan de régime
- Un manuel d'instructions



CONSEILS D'UTILISATION

- Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser des crèmes raffermissantes ou anti-cellulitiques en complément de Vibraluxe Pro®.

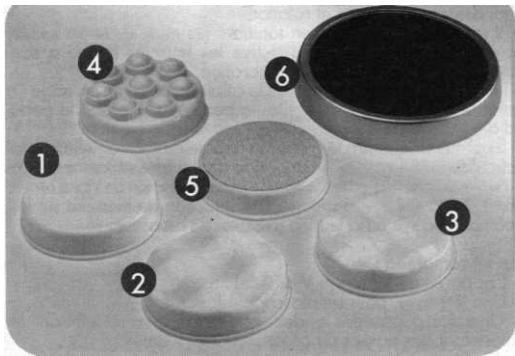

Accessoires

- Tête lisse (1). Elle est idéale pour réaliser un massage relaxant qui réduit la tension accumulée.
- Tête à grandes ondes (2), idéale pour réaliser un massage tonifiant et modelant sur le ventre, les cuisses et les fesses, où la graisse a tendance à se loger.
- Tête à petites ondes (3). Elle permet de réaliser un massage tonifiant et modelant sur la graisse localisée sur les bras ou les hanches.
- Tête à billes (4), idéale pour un massage réducteur à effet raffermissant.
- Tête à lime (5), pour limer les durillons des pieds. N'utilisez aucune crème avec cette tête.
- Filet de protection (6). Placez le filet sur la tête de Vibraluxe Pro avant de passer l'appareil sur une partie du corps **particulièrement** sensible afin de réaliser un massage plus doux. Utilisez ce filet uniquement avec la tête lisse et celle à ondes. Il est recommandé d'utiliser le filet pour réaliser un massage sur les épaules pour éviter que l'appareil n'attrape les cheveux. Si vous utilisez le filet, ne mettez pas de crème.

RÉGULATEUR D'INTENSITÉ

Le régulateur d'intensité permet d'adapter le massage à la partie du corps à traiter. L'intensité faible est recommandée pour les parties du corps plus sensibles, comme les bras, les jambes, le ventre, les jambes avec des varices, le dos, les épaules. L'intensité plus élevée est recommandée pour les parties du corps présentant de la graisse localisée, comme les cuisses et les fesses.

- N'utilisez pas Vibraluxe Pro plus de 5 minutes sur la même partie du corps.


FREQUENCE D'UTILISATION

Au début, il est recommandé d'utiliser Vibraluxe Pro® une fois par jour, puis 2-3 fois par semaine comme mesure d'entretien. N'utilisez pas l'appareil plus de 5 minutes sur la même partie du corps.

MODE D'EMPLOI

- Branchez l'appareil à une prise électrique.
- Placez la tête souhaitée en effectuant une pression. Si vous le souhaitez, placez le filet de protection par-dessus la tête.
- Sélectionnez l'intensité du massage au moyen du régulateur d'intensité.
- Lorsque vous avez terminé le massage, faites tourner le régulateur d'intensité pour le placer sur OFF. - Débranchez l'appareil.

UTILISATIONS RECOMMANDÉES

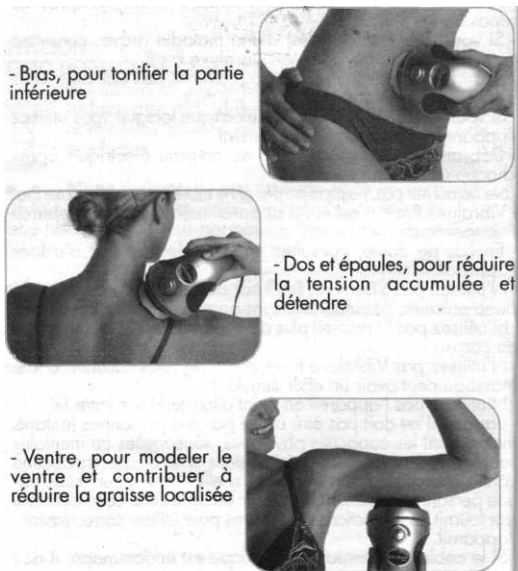

- Fesses et hanches, pour tonifier et contribuer à éliminer la graisse rebelle



- Cuisses, pour modeler, tonifier et contribuer à réduire la graisse localisée



-Jambes, pour réduire les tensions



- Pieds, pour limer les durillons

NETTOYAGE, ENTRETIEN ET RANGEMENT

Après avoir débranché le Vibraluxe Pro, nettoyez-le avec un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau. N'utilisez pas de détergents.

Rangez le Vibraluxe Pro dans un endroit frais et sec, de préférence dans sa trousse, avec les têtes.

Le Vibraluxe Pro est couvert par une garantie contre les défauts de fabrication, dont la durée dépend de la législation en vigueur dans chaque pays.

MISE AU REBUT DE L'APPAREIL

Afin de respecter l'environnement, jetez cet appareil, les piles et/ou l'adaptateur de courant dans des conteneurs prévus pour les appareils électriques et/ou électroniques.

CERTIFICATS ET RÉGLEMENTATION

Ce produit est conforme à la Directive Basse Tension 2006/95/CE, à la Directive de compatibilité électromagnétique 2004/108/CE, à la Directive d'éco-conception 2009/125/CE, à la Directive RoHS 2002/95/Ct et aux réglementations LFGB et REACH.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance: 25 W Fréquence: 50

HZ Tension: 220 V -240 V N°

t./min. minimum : 1 940

N°t./min. maximum : 3 200

Cette garantie ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation inappropriée, d'une négligence de la part du commerçant, d'une usure anormale, d'accidents ou d'une mauvaise manipulation.

Le Vibraluxe Pro a une isolation double, et n'a donc pas besoin de prise de terre. Vérifiez toujours que la tension du réseau correspond à la valeur indiquée sur la plaque des données de l'appareil.

ATTENTION

MISE AU REBUT DE L'APPAREIL

Le symbole de la poubelle à roues barrée d'une croix indique que vous devez respecter les réglementations locales concernant le recyclage de ce type de produit.

Ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Il doit être recyclé séparément, conformément aux réglementations locales.

Les appareils électriques et électroniques contiennent des substances nocives pour l'environnement et la santé. Ils doivent être recyclés dans des conditions appropriées.

Fabriqué en Chine