


Notice Siège de bain Medici

Le siège de Bain Médici est un siège de bain très léger et stable. Il existe en deux hauteurs : 20 cm et 30 cm. La longueur de l'assise se déploie de 48 à 61 cm pour coller aux parois intérieures de toutes les baignoires. Il est équipé de 4 ventouses avec languettes de décompression.

Installation :

- 1/ Avant l'installation, veuillez-vous assurer que votre baignoire et les ventouses de votre siège soient propres et sèches.
- 2/ Une fois installée au fond de votre baignoire, ajustez la longueur de votre siège en tournant simultanément les molettes d'étirement de l'assise (tournez dans le sens de la flèche « expand »).
- 3/ Chaque côté de votre assise doit venir s'appuyer sur les rebords de votre baignoire. Vous pouvez réduire votre longueur d'assise en tournant les molettes dans le sens de la flèche « contract ».
- 4/ Veillez à ce que les deux rallonges soient de même longueur de manière à ce que l'assise principale soit centrée par rapport à la largeur votre baignoire.
- 5/ Les 2 rebords de votre assise doivent impérativement adhérer entièrement aux rebords de votre baignoire (cf schéma ci-dessous).

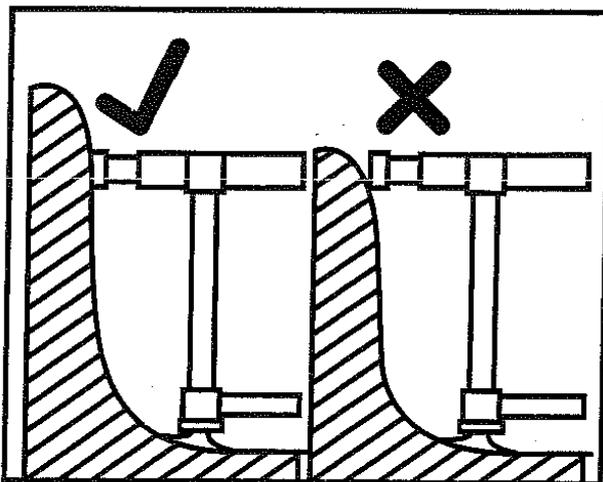

Le poids maximum supporté par ce siège est de 190kg.
Pour le nettoyage, ne pas utiliser de produits abrasifs et corrosifs.